

BioPlus 600/660D

GRAM

Biostorage you can depend on



BioPlus ER660D.
Schubladen sowie Glastür sind optional als
Zubehör erhältlich.

Die **BioPlus 600/660D** Baureihe ist zur Aufbewahrung empfindlichster Proben und Reagenzien ausgelegt, bei der selbst geringe Temperaturschwankungen gravierende Auswirkungen auf deren Beschaffenheit haben können.

BioPlus 600/660D Kühlgeräte sind durch die integrierte Trockenkühlfunktion ebenfalls in der Lage, die relative Luftfeuchtigkeit im Inneren des Schrankes zu reduzieren.

Mit ihrer effektiven und energieoptimierten Kältetechnologie zeichnen sich die Geräte gleichzeitig durch einen besonders niedrigen Energiebedarf aus. Zum Schutz der Umwelt und der Ozonschicht werden bei Gram Produkten natürliche Kältemittel sowie eine FCKW und FKW-freie Isolierung eingesetzt.

Medikamentenkühlschrank gemäß DIN 58345

Diese Baureihe ist ebenfalls zur Lagerung von Medikamenten sowie Impfstoffen konzipiert. Die Modellserie kann optional nach den Anforderungen der DIN 58345 ausgestattet werden.



Der BioPlus 600/660D ist als Kühl- sowie Gefrierschrank, mit weißem Gehäuse oder aus Edelstahl verfügbar. Kühlschrankschrank mit isolierter Glastür und Gefrierschrankschrank mit Massivtür erhältlich.



II 3G Ex nA nC nL IIB T2
TÜV 10 ATEX 354663

Biostorage
you can
depend on



BioPlus 600/660D



Biostorage you can depend on

Toppanel mit BioLine Steuerung

Die MPC-Steuerung besitzt u.a. ein Sicherheitssystem mit individuell einstellbaren Temperatur- und Türöffnungsalarmpunktionen, sowie einen potentialfreien Kontakt zum Anschluss an eine GLT. Die Tasten können einfach gesperrt werden.




Durchführung

ø 24,5 mm
Durchführung
- für den Einsatz von externen Fühlern geeignet.



E-Fühler

Zusätzlicher Fühler für Temperaturmessungen in Referenzgefäßen.

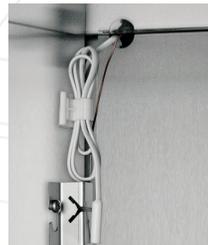

Böden, Schubladen und Gitterroste

Die Innenausstattung kann je nach Bedarf konfiguriert werden. Somit ist größte Flexibilität gewährleistet.



EINZIGARTIGE LUFTFÜHRUNG

Durch die speziell von Gram entwickelte Luftführung wird eine einheitliche Kälteverteilung im gesamten Innenraum garantiert.

Füße und Rollen

Edelstahl Innenkorpus

Optional sind Rollen bzw. Standfüße in unterschiedlichen Größen verfügbar. Der Innenkorpus besteht aus hochwertigem Edelstahl.

ATEX

Alle BioPlus Modelle erfüllen die Bedingungen der ATEX Richtlinie nach Kategorie 3, Zone 2 – sowohl intern, als auch extern und ermöglichen die Verwendung in Bereichen, in denen explosionsgefährdete Gemische auftreten können.



| Technische Spezifikationen | BioPlus ER600/660D | BioPlus RF600/660D |
|---------------------------------|---|---|
| Temperaturbereich | +15/-2 °C | -5/-25 °C |
| Umgebungstemperatur | Massivtür 10/43 °C; Glastür (ER) 10/38 °C | |
| Steuerung | Gram Steuerung, potentialfreier Kontakt, E-Fühler, individuell programmierbarer akustischer und optischer Tür- und Temperaturalarm, Alarmspeicher, kalibrierbar | |
| Material innen | Edelstahl | |
| Material außen | Lackiertes Stahlblech oder Edelstahl | |
| Maße mm (B x T x H) | 600D: 695 x 876 x 2010* / 660D: 695 x 876 x 2160 | |
| Bruttovolumen | 600D: 600 Liter / 660D: 660 Liter | |
| Nettovolumen | 600D: 432 Liter / 660D: 484 Liter | |
| Module für Roste und Schubladen | 600D: Böden / Roste 24 - Schubladen 12 / 660D: Böden / Roste 27 - Schubladen 13 | |
| Isolierung | 60 mm Polyethan mit FCKW- und FKW-freiem Cyclopentan Treibmittel | |
| Kältemittel | R290 / R134a / vorbereitet für Zentralkühlung | R290 / R404A / vorbereitet für Zentralkühlung |
| Kälteleistung bei -10 °C | R290 389 Watt / R134a 314 Watt | - |
| Kälteleistung bei -25 °C | - | R290 475 Watt / R404a 568 Watt |
| Energieverbrauch | 1.6 kWh/24h | 3.7 kWh/24h |
| Geräuschniveau | 48.5 dB(A) | 49.8 dB(A) |
| Sockel | Füße** | |
| Anschluss | 230 V, 50 Hz | |
| Umluftsystem | BioLine Luftverteilungssystem | |
| Abtauverfahren | Smart defrost und automatische Wiederverdunstung des Tauwassers | |

* Reduzierung der Höhe auf unter 2000 mm ohne Aufpreis möglich

** Das Gerät ist ohne Aufpreis auch auf Füßen, sowie für die Sockelmontage erhältlich

Ihr Fachhändler:
www.axon-labortechnik.de



Axon Labortechnik GmbH
Im Brauenstück 16 - D-67659 Kaiserslautern
Verkaufsbüro Tel. 06223/95 41 190 Fax: 06223/95 40 714
info@axon-labortechnik.de