

Kühlbrutschrank mit Umluft

KB 9205



(Abb. ähnlich)

Außenabmessungen: B = 750 mm
T = 820 mm
H = 2100 mm

Innenabmessungen: B = 600 mm
T = 670 mm
H = 1330 mm

Brutto-Inhalt: 700 l

Temperaturbereich: 2°C bis 50°C

Außengehäuse (Hochformat)

aus Stahlblech verzinkt, weiß pulverbeschichtet, antibakteriell beschichtet. Mit 4 Stellfüßen, höhenverstellbar.

Optional: aus **Edelstahl** (W Nr. 1.4301) (Rückwand sowie Geräteober-/unterseite aus Stahlblech verzinkt)

Rollensatz mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar

Innenraum

aus Stahlblech verzinkt, weiß pulverbeschichtet, antibakteriell beschichtet. Reinigungsfreundlich durch abgerundete Ecken, glatte Oberfläche im Innenraum, entspricht höchsten Hygieneanforderungen.

Optional: aus **Edelstahl** (W Nr. 1.4301)

Wärmedämmung

Geschäumter PU-Schaum mit einer Stärke von 75 mm. FCKW-frei

Umluftkühlung

für schnelle, gleichmäßige Temperierung, reduziert das Temperaturgefälle auf ein Minimum. Beim "Öffnen" der Tür wird der Umluftventilator automatisch über Mikroschalter abgeschaltet, um das Ansaugen warmer Umgebungsluft zu verhindern.

Tür

Vollmaterialtür einflügelig, serienmäßig mit Rechtsanschlag, ohne Mehrpreis auch mit Linksanschlag lieferbar. Magnetchtrahmen fettbeständig.

Optional: - **Glastür**

- **Türschloss** mit 2 Schlüsseln, oder elektronisches Türschloss

Innenausstattung

LED-Innenraumbeleuchtung EIN/AUS automatisch über Mikroschalter


3 St. Drahtgitter-Einschubroste, (Abm: 530 x 650 mm) weiß beschichtet (max. 13 Einschubroste möglich)

Kühlbrutschrank mit Umluft

KB 9205

Optional:

- **Steckdose** (230 V, 50 Hz), im Nutzraum angeordnet, EIN/AUS-Taster
- **1 St. Wanddurchbruch**, verrohrt \varnothing 40 mm, oder \varnothing 13,5 mm, zum Einbringen betriebsbereigener Messleitungen
- **Edelstahl-Einschubroste**, oder
- **Edelstahl-Schubfach mit 3 Längsteiler** (max. 13 Schubfächer möglich)
Schubfach-Abmessung: 500x575x77 mm, Nutzbare Breite zwischen den Längsteilern: 108,5 mm (demontierbar).
Auf Rollen gelagert, Teleskopführung mit Arretierung

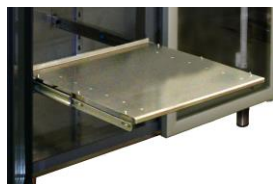

Optional:
Spezieller Teleskopauszug
aus Stahlblech verzinkt.
(max. Belastung 50 kg / oder Schwerlast bis 100 kg)

Regeleinrichtung oberhalb der Tür angeordnet

Mikroprozessor gesteuerte PID-Regler,

der mit Soft-Touchpads und LCD-Display betrieben wird und die Steuerung aller Funktionen und des Betriebsstatus des Kühlbrutschrankes ermöglicht (einschließlich Alarme). Das Bedienfeld ist batteriebetrieben, um die Alarmfunktion auch im Fall von Stromausfall zu gewährleisten.

Die Hauptfunktionen des Bedienfelds sind:

- Große LCD-Anzeige (2 Zeilen), weiß hinterleuchtete Farbe mit schwarzen Zeichen, die den
- Betriebsstatus des Geräts anzeigt (Abtauen, Alarm läuft, aktuelle Temperatur usw.)
- Digitale Temperatureinstellung und -anzeige mit einer Genauigkeit von 0,1 ° C
- Passwortgeschützt mit automatischer Verriegelung
- Akkugestützt mit automatischer Aufladung, die das Bedienfeld im Fall eines Stromausfalls bis zu 48 Stunden autark hält
- RS 485 Schnittstelle
- Potentialfreier Kontakt
- Visuelle und akustische Alarmsignalisierung (mit automatischer Rücksetzung) für:
 - Über- und Untertemperatur mit vom Benutzer programmierbaren Grenzwerten
 - „Tür offen“ Alarm (mit Zeitverzögerung von 3 Minuten)
 - Stromausfall
 - Batterie entladen
 - Kondensator verschmutzt
 - Vereisung Verdampfer
 - Sensorfehler
- Stummschaltungsmöglichkeit (für 3 Minuten) für die akustischen Alarme, mit kontinuierlicher Warnanzeige im Display
- Batterie- und Alarmtest
- Alarmspeicher (nicht löscher) für die letzten 30 Alarmbedingungen
- Ereignisspeicher
- NTC-Sensoren für die Genauigkeit der Temperaturregelung

Arbeitsbereich von 2°C bis 50°C

Temperaturgenauigkeit +/- 1,0°C nach Stabilisierung (b. 50% Befüllung)

Kühlaggregat

vollhermetisch, zwangsbelüftet auf Schwingungsdämpfern montiert (Umgebungstemperatur 32°C, a. A. 50°C), geräuscharmer (50dBa/1m), energie-sparsamer Verdichter mit hochwertigem Verdampfungssystem.
Kältemittel: R452A oder gleichwertig.

Abtauung

automatisch mit zeitlicher und thermischer Überwachung. Tauwasserverdunstung in beheizter Schale.
Während der Abtauphase steigt die Temperatur im Innenraum (Luft), nicht im Beschickungsgut, kurzfristig an.

Heizelement

Im Innenraum montiert, verbaut im Edelstahlgehäuse zusammen mit Innenraumlüfter.

Elektrische Daten

Netzanschluss	230 V/50 Hz a.A. 60 Hz / 1phasig
Absicherung	16 A
Anschlussleitung	1,5 m mit Schukostecker

Verpackung (auf Palette)

Abmessung: ca. 85x98x224 cm
Nettogewicht: 160 kg
Bruttogewicht: 180 kg

Sonderausstattung und Zubehör:



GSM Modul

Anschluss an den potentialfreien Ausgang, Bei Alarm wird automatisch eine SMS (von 25 bis zu 160 Zeichen) oder ein Anruf (aufgezeichnete Nachricht von 6 bis 20 Sekunden) verschickt. Speichern von bis zu 1000 Telefonnummern möglich. Das GSM-Modul ist mit einem Akku ausgestattet. Automatische Warnmeldung per SMS, wenn das Guthaben auf der Sim-Karte verbraucht ist. Pro Modul können 6 Geräte angeschlossen werden. Die SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten

Qualifizierungen



DQ (Design-Qualifizierung)

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass die qualitätsrelevanten, GMP-bezogenen Anforderungen beim Design der Ausrüstungsgegenstände einschließlich Gebäude, Räumlichkeiten und Hilfseinrichtungen angemessen berücksichtigt wurden.

Die vom Anwender definierten Anforderungsprofile (Lastenhefte) werden durch uns dokumentiert und bestätigt. Auf Wunsch kann ein Pflichtenheft von uns erstellt werden.

IQ (Installations-Qualifizierung)

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass kritische Ausrüstungsgegenstände und Systeme in Übereinstimmung mit den gestellten Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften geliefert und installiert wurden.

Die Dokumentation der IQ wird von uns speziell für das gelieferte Gerät ausgearbeitet und Ihnen zur Verfügung gestellt. Die IQ ist vom Kunden selbst durchzuführen. Auf Wunsch kann die Qualifizierung vor Ort durchgeführt werden.

OQ (Funktions-Qualifizierung)

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass kritische Ausrüstungsgegenstände und Systeme in Übereinstimmung mit den gestellten Anforderungen im gesamten Arbeitsbereich unter Einhaltung vorgegebener Grenzen wie beabsichtigt funktionieren

Die Dokumentation der OQ wird von uns speziell für das gelieferte Gerät ausgearbeitet und Ihnen zur Verfügung gestellt. Die OQ ist vom Kunden selbst durchzuführen. Auf Wunsch kann die Qualifizierung vor Ort durchgeführt werden.

CQ (Kalibrierung)

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass kritische Messeinrichtungen im vorgesehenen Wertebereich unter Einhaltung vorgegebener Toleranzen unter aktuellen Betriebsbedingungen zuverlässig arbeiten

Überprüfen der Temperatur im Innenraum

1 Temperatur auf 6 verschiedenen Messstellen (Messung erfolgt mit kalibrierten PT 1000 Fühler) gleichmäßig auf den Fachlagen verteilt. Prüfzeit 6 Stunden, danach Tür öffnen von 30 Sekunden. Die Temperatur im Innenraum des Kühlbrutraumes muss sich innerhalb von 1 Stunde auf den Sollwert stabilisiert haben. Die Messung wird im leeren Zustand durchgeführt.

Die Temperaturmessungen werden in **unserem Hause** durchgeführt, graphisch dargestellt, und Ihnen zur Verfügung gestellt. Die Werte dürfen nicht die von uns angegebenen Toleranz über- bzw. unterschreiten. (Zusätzliche Messstellen auf Anfrage möglich)

PQ (Leistungs-Qualifizierung)

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass kritische Ausrüstungsgegenstände und Systeme in Übereinstimmung mit den gestellten Anforderungen im gesamten Arbeitsbereich unter aktuellen Arbeitsbedingungen (mit Produkt) die geforderten Leistungen erbringen.

Die oben beschriebene Kalibrierung wird unter realen Bedingungen vor Ort durchgeführt.

Die Temperaturmessungen werden graphisch dargestellt, und Ihnen zur Verfügung gestellt. Die Werte dürfen nicht die von uns angegebenen Toleranz über- bzw. unterschreiten.

Ihr Fachhändler:
www.axon-labortechnik.de

Axon
Labortechnik

Axon Labortechnik GmbH
Im Braumenstück 16 - D-67659 Kaiserslautern
Verkaufsbüro Tel. 06223/95 41 190 Fax: 06223/95 40 714
info@axon-labortechnik.de