

SUFsg 7001

Labor-Ultratiefkühlschrank

MediLine

Ihr Fachhändler:
www.axon-labortechnik.de



Axon Labortechnik GmbH
Lauerhöfer Str. 9a - D-67697 Kaiserslautern
Tel. 06301/794 830
info@axon-labortechnik.de



SUFsg 7001

Labor-Ultratiefkühlschrank
MediLine



Zubehör

614536700	Datenlogger, Ultratieftemperatur (ULT)
779000300	Aluminium-Rack 5x4
779001400	Aluminium-Rack 6x4
779001500	Aluminium-Rack 5x4 mit Boxen
779002500	Aluminium-Rack 6x4 mit Boxen
779002700	Edelstahl-Rack 5x4
779002800	Edelstahl-Rack 6x4
779002900	Edelstahl-Rack 5x4 mit Boxen



Brutto- / Nettorauminhalt	728/700 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	1204/1082/1966
Innenmaße in mm (B/T/H)	890/605/1300
Energieverbrauch in 365 Tagen	2957 kWh ¹
Umgebungstemperatur	+16 °C bis +32 °C
Wärmeabgabe	1224
Wärmeabgabesystem	Luftkühlung
Kältetechnologie	Kaskadenkühlung
Kältemittel	R 290 / R 170
Geräusch-Schallleistung	47 dB(A) ²
Frequenz / Spannung	50 Hz / 230 V~
Temperaturbereich	-40 °C bis -86 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Edelstahl
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Netzausfallalarm	unmittelbar bei Netzunterbrechung für 72 h
Potentialfreier Kontakt	Ja
Art der Vernetzbarkeit	externer Datenlogger
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	LAN (Ethernet)
Datenlogger	integriert, USB-Schnittstelle
Kühlsystem	statisch
Abkühlung +22 °C auf -80 °C	450
Erwärmung -80 °C auf -60 °C / auf 0 °C	250 / 2220
Anzahl / Maximale Anzahl der Ablageflächen	4 / 11
Material Ablageflächen	Edelstahl
Belastbarkeit Ablageflächen	50 kg
Maximale Gesamtbelastung	200 kg
Anzahl Racks pro Einschub	6
Max. Anzahl Kryoboxen 50 mm / 75 mm	528 / 336
Rollen	Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten
Fühlerdurchführung	3 x Ø 28
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts fest
Brutto-/Nettogewicht	361/313 kg
EAN-Nr.	9005382236772

Die Übersicht stellt einen Auszug der wichtigsten Zubehöre dar.
Alle weiteren Zubehöre des Geräts sowie weitere Informationen finden Sie unter
home.liebherr.com

Features




Umweltfreundliches Kältemittel

Liebherr-Geräte sind im Hinblick auf bestmögliche Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten optimiert. Zum Einsatz kommen ausschließlich die natürlichen und umweltfreundlichen Kältemittel R 600a und R 290. In Verbindung mit hocheffizienten Kompressoren sind diese äußerst leistungsstark – und mit ihrem niedrigen Treibhauspotenzial auch zukunftssicher.




Effizientes Kältesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

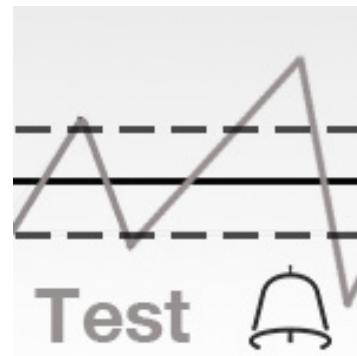

Alarm-Test-Funktion

Mit diesem Testlauf kann die Funktionsfähigkeit der internen und einer eventuell extern angeschlossener Alarmanrichtung geprüft werden. Die Kühlung des Gerätes wird während diesem Testlauf nicht unterbrochen.

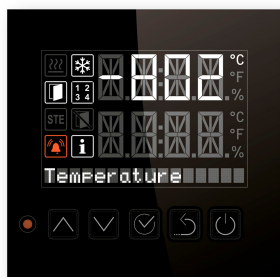

Überwachungssystem

Das 3-stufige Überwachungssystem, bestehend aus integrierten Alarmmeldungen zu Temperatur-, Tür- oder Netzstörungen sowie erweiterbaren Features wie CO2-Notkühlung und Online-Monitoring, sorgt für besten Schutz bei der Lagerung. Bei Stromausfall wird die Elektronik umgehend durch integrierte 12-Volt-Batterien versorgt. In kritischen Situationen erfolgt eine Benachrichtigung.



Abdeckung für Hauptschalter inkl. Schloss


Schutz vor unbeabsichtigter Abschaltung oder Manipulation des Hauptschalters



Geschäumte Innentüren

Die geschäumten Innentüren gewährleisten bestmögliche Isolierung und Temperaturstabilität und sorgen somit für eine effiziente Kühlung und einen geringeren Stromverbrauch.

Technische Zeichnung

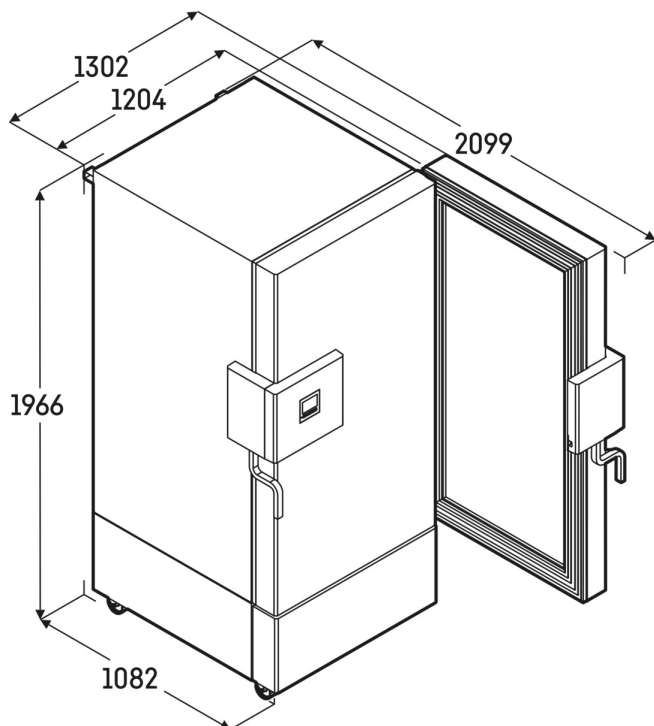

Die Produkte und ihre Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Obwohl wir uns bemühen, die Richtigkeit aller Angaben und Informationen in diesem Flyer zu gewährleisten, behält sich Liebherr das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Soweit die tatsächlichen Geräteabmessungen, -spezifikationen und -leistungen von entscheidender Bedeutung sind, empfehlen wir, die dem jeweiligen Gerät beiliegende Einbauanleitung zu prüfen. Liebherr haftet nicht für eventuelle Schäden. (11.07.2025)

